

IDEXX VetLab* UA* Analysegerät

Kurzanleitung

Lesen der IDEXX UA* Streifen


Verwenden Sie frischen, nicht zentrifugierten Urin. Schütteln Sie die Urinprobe gründlich. Die Probe muss bei der Durchführung des Tests Raumtemperatur haben und darf nicht älter als eine Stunde sein.

Per ulteriori istruzioni, vedere il *manuale operativo dell'analizzatore IDEXX VetLab* UA**.




- 1 Befeuchten Sie den UA Streifen mit Hilfe einer Pipette mit der Urinprobe und achten Sie dabei darauf, dass alle Testfelder benetzt werden. Den Streifen nicht knicken.

WICHTIG: Im IDEXX VetLab UA Analysegerät können nur IDEXX UA Streifen verwendet werden. Verwenden Sie keine Teststreifen anderer Hersteller.

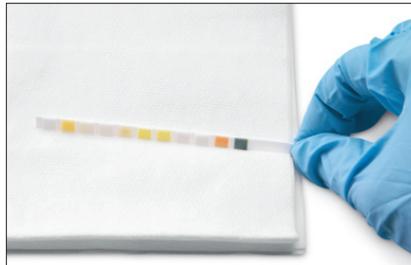

- 2 Tupfen Sie den langen Rand und dann die Rückseite des Teststreifens kurz (ca. eine Sekunde lang) auf einer absorbierenden Oberfläche (z. B. einem Papierhandtuch) ab.

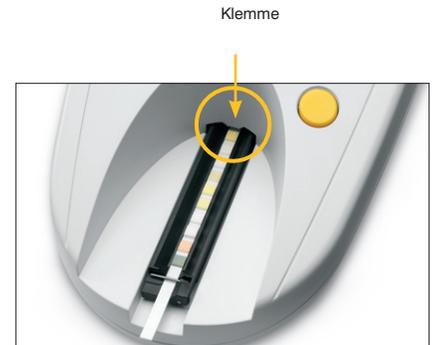

- 3 Legen Sie den Teststreifen mit den Testfeldern nach oben auf den Teststreifenschlitten, so dass die Vorderkante von der Klemme am Einführungsschlitz gehalten wird. Die Führungsschiene muss geöffnet sein. Ca. 2 mm des Streifens müssen unter der Klemme eingeschoben sein.



- 4 Drücken Sie die Taste **Start**. Es ertönt ein Piepton. Der Teststreifenschlitten bewegt sich langsam vorwärts und die Führungsschiene schließt sich.

Der Teststreifenschlitten zieht den Teststreifen zum Lesen automatisch in das Analysegerät und kehrt anschließend in seine Ausgangsposition zurück. Entfernen Sie den Teststreifen erst, nachdem das Analysegerät zum Modus Messbereit zurückgewechselt ist. Die gesamte Messung dauert etwa 80 Sekunden ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Taste Start drücken.



- 5 Nach dem Ausdrucken der Ergebnisse entnehmen und entsorgen Sie den Teststreifen. Entfernen Sie eventuelle Urinreste mit einem fusselfreien Tuch vom Teststreifenschlitten.

HINWEIS: Wenn das UA Analysegerät mit der IDEXX VetLab Station verbunden ist, werden die Testergebnisse automatisch übertragen.

Technischer Kundendienst von IDEXX

USA/Kanada/Lateinamerika 1-800-248-2483

Europa 00 800 1234 3399

Australien 1300 44 33 99

Neuseeland 0800-102-084

Asien 0800-291-018